

New!

V-FORM – Rivoluzione del Body Contouring

Piattaforma espandibile per vari trattamenti

Trattamenti più semplici !

- Maggiori trattamenti grazie ai 6 elettrodi offerti dalla tecnologia MULTI-CORE.
- Rappresenta il gold standard dei trattamenti di radiofrequenza.
- Più veloce il pre-riscaldamento.
- Migliore il mantenimento della temperatura.

Trattamenti confortevoli e sicuri !

- Innovativo sistema anti - scottatura ABS
- Tecnologia MULTI-CORE.

Prima



Dopo 8 Trattamenti



15 cm riduzione

Foto fornite da Viora

Prima




Dopo 8 Trattamenti



4 cm riduzione

Foto fornite da Viora.

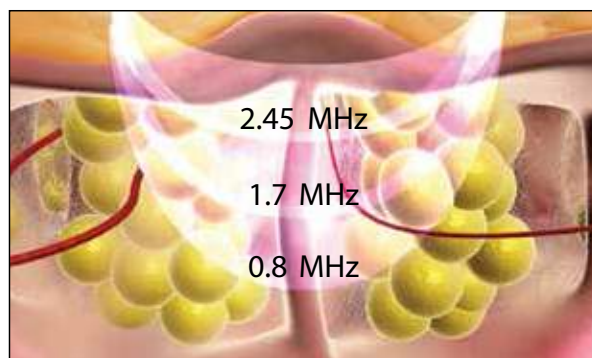

V-Form: gold standard multi-frequenza in RF per rimodellamento del corpo e la riduzione della cellulite.

La tecnologia offre tre canali di diversa profondità di frequenza, ed un quarto canale che incorpora tutte le tre frequenze controllando la profondità di penetrazione.

Specifications



Technology	Multi-CORE	
RF Mode I	0.8 MHz	
RF Mode II	1.7 MHz	
RF Mode III	2.45 MHz	
RF Mode IV	0.8 MHz, 1.7 MHz, 2.45 MHz	
Vacuum	Pulsato	
Features	Sistema anti - scottatura con termometro integrato	
Applicators	2	
	BC (Large)	BC (Small)
Treatment Area	97 mm x 83 mm	Ø 24 mm
RF Power	Up to 50 w	Up to 20 w



Distribuito da:
Delta Medical
www.deltamedical.it

www.vioramed.com
info@vioramed.com

New!

V10

Rivoluzione del Body Contouring Piattaforma espandibile per vari trattamenti


V10 - Rappresenta



Skin
Tightening



Body
Contouring

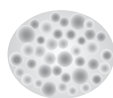

Riduzione
Cellulite



Resurfacing



Ringiovanimento

**Il V10 è un dispositivo a radiofrequenza che integra
le due tecnologie brevettate dalla Viora
la Tecnologia SVC™ e la Tecnologia MULTI-CORE**

• Tecnologia MULTI-CORE

Si basa sulla tecnologia bipolare ed emette RF su tre differenti frequenze Mhz più un sistema multi canale che combina le tre frequenze. Questo sistema ha rivoluzionato i trattamenti di radiofrequenza.

• **L' SVC™** è la seconda innovazione tecnologica della Viora per l'RF frazionale. Un unico sistema di commutazione Vacuum e raffreddamento consente di realizzare trattamenti che mirano alla profondità. Fornendo al medico la possibilità di scegliere una soluzione ablativa o coagulativa personalizzando i trattamenti per i singoli pazienti e per le specifiche necessità.

V·FORM



V·ST



V·FR



V₁₀



Distribuito da:
Delta Medical
www.deltamedical.it

www.vioramed.com
info@vioramed.com


V I O R A