

CARATTERISTICHE TECNICHE

| | |
|--------------------------|--------------------------------|
| Misure | 247 x 360x 221 |
| Peso | 2.8 KG |
| VALUTAZIONE IN INGRESSO: | 230VAC +- 10%, 50/60Hz |
| CONSUMO DI POTENZA: | 15VAC |
| FREQUENZA TERAPEUTICA: | 1MHz |
| MODE 1: | RF /PLASMA |
| MODE 2 | Continuo/1HZ/2HZ/3HZ Movimento |
| REGOLAZIONE D'USCITA: | 9 LIVELLI |
| DISPLAY: | INDICATORE LED |



CE 0068

Distribuito da


DELTA MEDICAL

Via Puglia, 25 - San Giovanni La Punta (CT)
Tel./Fax. 095.334641 - Cell. 349.8085017
www.deltamedical.it - info@deltamedical.it



REFACE


Reformina your face usina plasma technology with RF system



Come Funziona Reface ?

REFACE combina l'innovativa tecnologia del Plasma e della Radiofrequenza per offrire risultati straordinari in termini di rigenerazione della pelle e riduzione dei segni dell'invecchiamento.

Una delle funzioni di Reface è il Plasma che utilizza un micro-raggio focalizzato e controllato che ionizza l'aria presente tra il suo terminale e l'epidermide, sublimando i corneociti, ovvero le cellule superiori che formano lo strato protettivo dell'epidermide. Allo stesso tempo una quantità di energia raggiunge in maniera selettiva la giusta profondità del derma. Questa stimolazione consente un'immediata contrazione e riorganizzazione delle fibre collagene, una formazione di nuovo collagene ed un rinnovamento del tessuto epidermico.

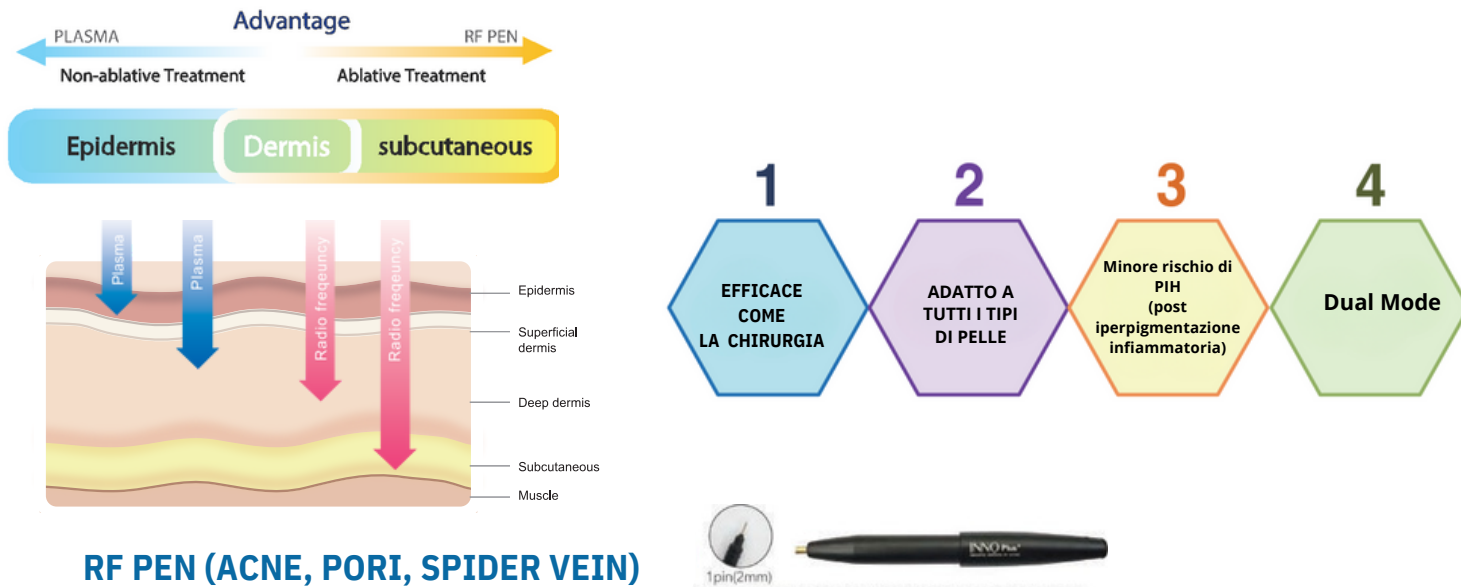


RF PEN (ACNE, PORI, SPIDER VEIN)



RF Pen utilizza la tecnologia della Radiofrequenza per stimolare il rinnovamento del collagene nella pelle. Il principio di base è quello di riscaldare i tessuti profondi della pelle, raggiungendo la sua struttura interna senza danneggiare la superficie esterna. Questo processo induce una contrazione delle fibre di collagene esistenti e stimola la produzione di nuovo collagene e elastina, migliorando così l'elasticità e la compattezza della pelle.


RF PEN 3pin (BORSE OCCHI, RUGHE FRONTALI, RUGHE LABIALI)

LABBRA/RUGHE SOTTILI - 3pin (3.5mm)

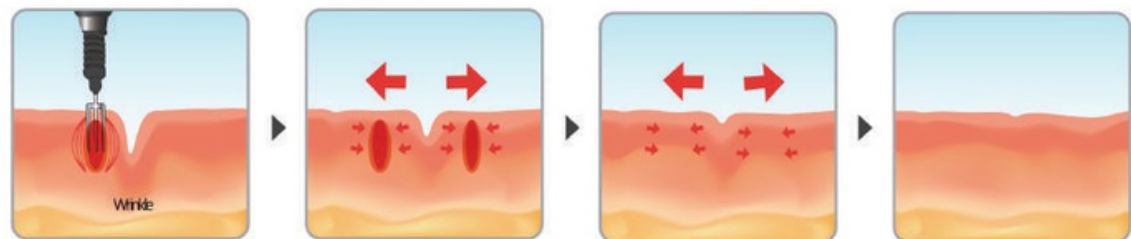


RF PEN 3pin(3.5mm)

Eye bag - 3pin(3.5mm)

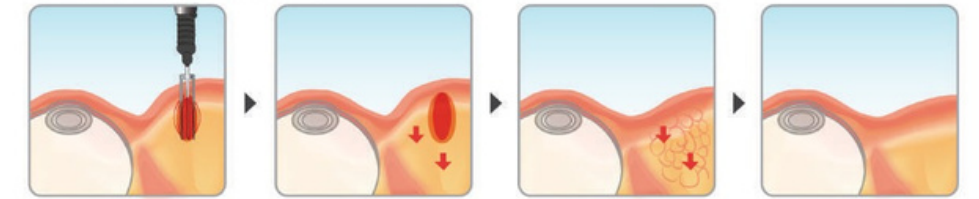


RF PEN 3pin(3.5mm) - BORSE OCCHI

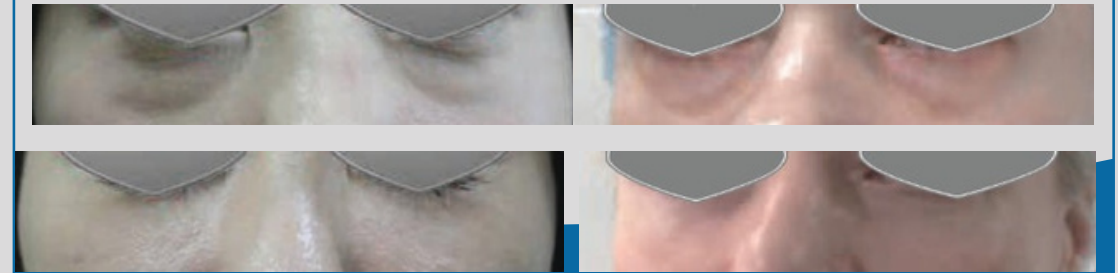

PLASMA TIP



PLASMA -RUGHE PERIOCCULARE

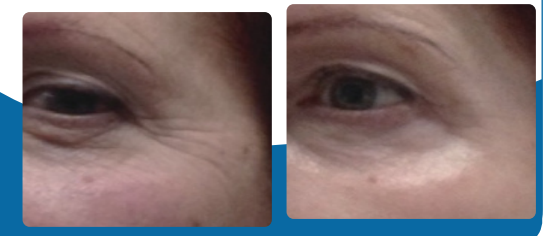

PRIMA

RISULTATO IMMEDIATO

BLEFARO NON CHIRURGICA