

DELTA TRINITY

INNOVATIVA TECNOLOGIA 3D

agisce a diverse profondità grazie a 3
lunghezze d'onda

Rapido. Sicuro. Intelligente



SPECIFICHE TECNICHE

Lunghezza d'onda	755nm , 808nm,1064 nm
Monitor del manipolo	2.1 inch touch LCD screen + 1.3 inch display screen
Monitor del dispositivo	15,6 Android
Energia	10-40J/CM2
Frequenza	1-10Hz
Durata d'impulso	10-300ms
Sistema di Raffreddamento	TEC CONDENSATORE+ARIA+ACQUA
Energy Supply	1600 w
Package Size (L*W*H)	62cm*53cm*53cm
Garanzia	2 anni
Laser power 4000w	50 milioni

Distribuito da


DELTA MEDICAL

Via Puglia, 25 - San Giovanni La Punta (CT)
Tel./Fax. 095.334641 - Cell. 349.8085017
www.deltamedical.it - info@deltamedical.it



DELTA TRINITY

Per trattare ogni tipo di pelo in qualsiasi periodo dell'anno è il laser per l'epilazione che unisce 3 lunghezze d'onda in un unico manipolo per un'epilazione più efficace e veloce.

La combinazione delle 3 differenti lunghezze d'onda consente agli utenti di avere, attraverso i trattamenti laser, una migliore efficacia e maggiore copertura poiché vengono raggiunte simultaneamente differenti profondità del follicolo pilifero

LA TECNOLOGIA

SHR™:

La tecnologia Super Hair Removal consente di ottenere un riscaldamento del derma che, gradualmente, raggiunge la temperatura ideale per il danneggiamento del follicolo pilifero e ne impedisce la ricrescita. L'elevata selettività consente di evitare danni al tessuto circostante.

IN MOTION™:

Il trattamento viene eseguito in movimento consentendo la copertura totale dell'area da trattare.

ICE™:

La superficie della pelle viene raffreddata grazie al contatto con punta di zaffiro. Tale tecnologia consente di ridurre al minimo il rischio di ustioni, aumentando il comfort del paziente e rendendo il trattamento praticamente indolore

RAFFREDDAMENTO CON IMPIANTO DI REFRIGERAZIONE

Raffreddamento Continuo. ICE è una tecnologia avanzata che raffredda continuamente la pelle e facilita il mantenimento di una temperatura controllata durante l'intero trattamento. I pazienti possono godere di un trattamento completamente indolore, fresca e confortevole per tutta la sessione, grazie al compressore dotato di radiatore per una migliore dissipazione del raffreddamento e una maggiore durata



Sistema Android

Intuitivo e Funzionale.


Questo macchinario è dotato di un nuovo schermo Android da 15.6 di grandi dimensioni, con parametri preimpostati. I professionisti del settore possono quindi lavorare in sicurezza con un nuovo sistema più intuitivo e funzionale

Differenti misure di testine intercambiabili



FACIAL TIP

La Facial Tip è l'unico adattatore che permette di trattare tutte le aree difficilmente raggiungibili, comprese le orecchie, narici e glabella. Si adatta a tutti i moduli.

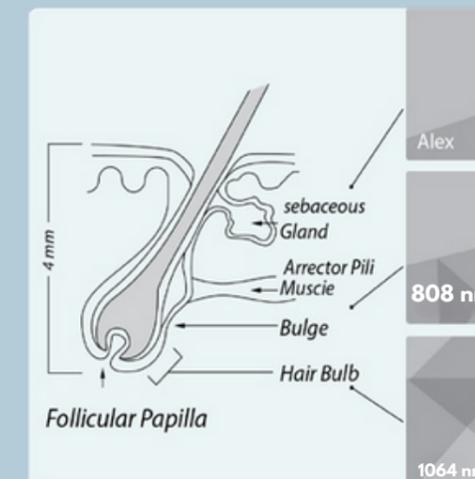

ALEX 755 nm

Grazie ad un maggiore assorbimento della melanina, l'Alex colpisce tutti i tipi di pelo, inclusi quelli chiari e sottili. L'obiettivo di questa lunghezza d'onda è l'area di bulge del follicolo pilifero, la più superficiale.

808 nm

Il moderato assorbimento della melanina ed una penetrazione più profonda nel follicolo pilifero, consente al Diodo Speed di raggiungere direttamente il bulbo del pelo, ed è ideale per tutti i tipi di pelle anche quelle più scure.

1064 nm

Il basso assorbimento della melanina e la penetrazione più profonda nel follicolo pilifero consente allo Yag di trattare le pelli più scure. Allo stesso tempo, oltre che il bulbo, raggiunge anche la papilla.