

Tipo di energia	Vacuum + Cooling
Durata trattamento	30, 45, 60 min
Dimensioni Aree da trattare	circa 10x20 cm
Display	10.4 Inch LCD Touch Screen
Vacuum	-310mb
Voltaggio	AC 100-220V, 50/60 Hz
Dimensioni	390 x 520 x 210 mm
Peso	53 Kg

MICCOOL

Trattamenti di criolipolisi



Distribuito da




Chirurgia? No!
Anestesia? No!
Tempi di inattività? No!


Caratteristiche

- Multi applicatore con varie tipologie di Tip, permettono di trattare diverse aree.
- Efficace senza dolore e anestesia.
- Possibilità di trattare due zone contemporaneamente grazie ai due applicatori.
- Software intelligente.
- Durata del trattamento 60 minuti.
- Primi risultati visibili dopo 15 giorni.

Zone di trattamento

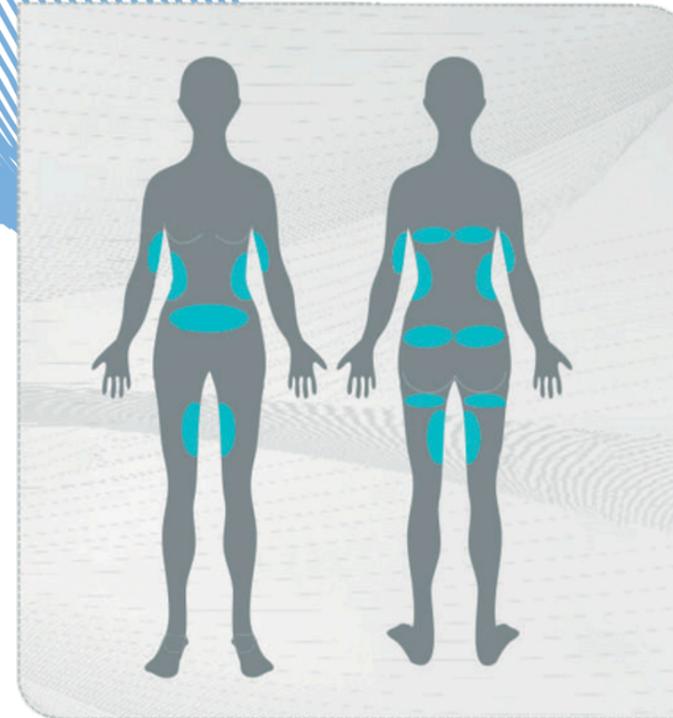

Risultati

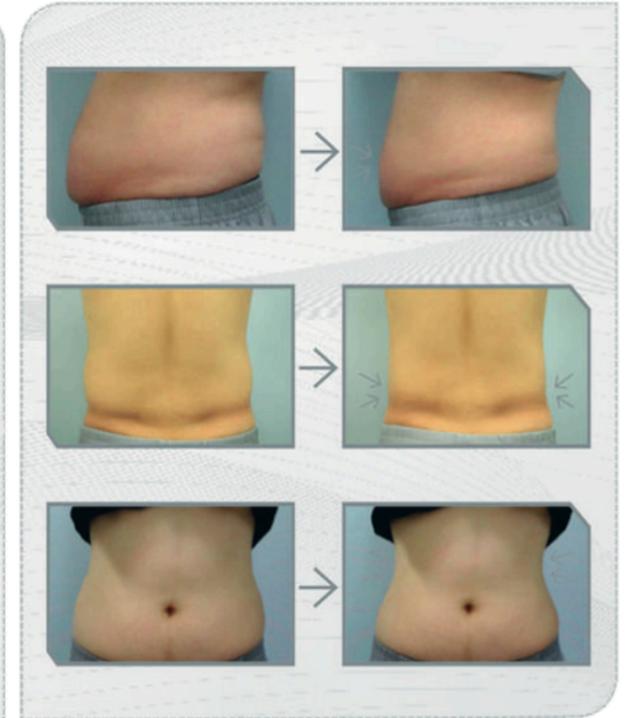

Cos'è MICOOL ?

Il dispositivo **Micool-a** è il rivoluzionario sistema di criolipolisi che offre un nuovo trattamento, non invasivo. Efficace alternativa alla liposuzione chirurgica per la riduzione del grasso.


Come funziona MICOOL ?

Effetto Vacuum

- Nella zona da trattare viene applicata una particolare pellicola di gel anticongelante.
- Per effetto dell'applicatore vacuum, il tessuto viene aspirato, creando un'ischemia impedisce al flusso sanguigno di aumentare la temperatura nella zona trattata.

Cooling

- Quando le cellule adipose sono esposte a temperature basse (raffreddamento) comincia un processo naturale di eliminazione (apoptosi).
- Le cellule morte situate nella zona trattata sono progressivamente e naturalmente eliminate dal metabolismo tramite il sistema linfatico.

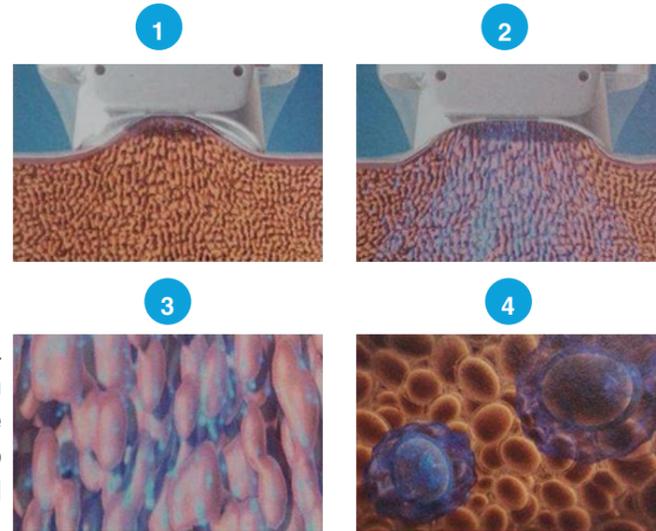

Smart Gel Pad

Smart Gel Pad è una membrana di gel che viene applicata sulla zona da trattare, imbevuta di una particolare sostanza anticongelamento. L'utilizzo monouso consente di preservare la pelle dal freddo e mantenere pulita e sterilizzata la zona da trattare.

